

Návod k použití

Toaletní židle Reha Fund MICHAEL 805 RF-805



Určení dokumentu

Tento návod popisuje sestavení, nastavení, bezpečné používání, čištění a údržbu přenosné toaletní židle MICHAEL 805. Před prvním použitím si jej celý přečtete a uschovejte pro další potřebu.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za nesprávné používání výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel ani používání v rozporu s určením.

Technické údaje

Katalogové číslo	RF-805
Celková délka	64 cm
Celková šířka	51 cm
Celková hloubka	59,5 cm
Šířka sedátka	49,5 cm
Hloubka sedátka	41 cm
Rozsah výšky sedátka	41-56,3 cm
Maximální hmotnost uživatele	120 kg
Hmotnost židle	6 kg

Použité materiály

Víko sedátka, područky a toaletní sedátko	PE - polyetylen
Rám	ocel
Koncovka, víko nádoby, nádoba a stabilizační koncovka	PVC - polyvinylchlorid

I Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti REHA FUND Sp. z o.o. Tento návod obsahuje pokyny a doporučení nezbytné ke správnému používání výrobku. Fotografie v návodu jsou pouze ilustrační.

III Určení a použití

Toaletní židle slouží jako přenosná toaleta a lze ji používat u lůžka pacienta. Pomáhá osobám s omezenou pohyblivostí a starším osobám při základních fyziologických potřebách a usnadňuje péči o ně. Boční opěrky usnadňují usedání a vstávání.

IV Kontraindikace

Kontraindikací je zákaz vertikalizace, poranění dolních končetin znemožňující udržení rovnováhy, poruchy pohybové koordinace, potíže s rovnovážným ústrojím a nestabilita páteře. Osoby s intelektovým omezením nesmějí výrobek používat bez dohledu pečující osoby.

V Obecná pravidla bezpečného používání

Pro zachování bezpečnosti dodržujte tato doporučení:

1. Před použitím toaletní židle se ujistěte, že:
 - výška židle je správně nastavena;
 - zajišťovací tlačítka správně fungují;
 - gumové koncovky jsou v dobrém stavu;
 - všechny čtyři nohy židle jsou nastaveny na stejnou výšku.
2. Používejte pouze originální příslušenství. Neoriginální díly mohou způsobit nesprávné přizpůsobení židle a zvýšit riziko pádu.
3. Nepřekračujte maximální povolené zatížení židle 120 kg.
4. Židli neskladujte při teplotě nižší než 0 °C.
5. Každou závažnou nežádoucí příhodu související s výrobkem oznamte výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.
6. Při otevření obalu zkontrolujte úplnost soupravy a případné nesrovnalosti. Pokud zjistíte závadu nebo neúplnost, kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
7. Při používání postavte židli na rovný, suchý a neklouzavý povrch.
8. Zkontrolujte správné upevnění odnímatelných nohou a klipů pro nastavení výšky.
9. Před každým použitím ověřte, že hmotnost uživatele nepřekračuje nosnost stanovenou výrobcem.

Nedodržení uvedených bezpečnostních pravidel může vést k vážným úrazům.

VI Způsob používání

Usedání a vstávání

1. Ujistěte se, že židle stojí stabilně a je připravena k použití.
2. Postavte se k židli zády tak, aby se zadní strana kolen dotýkala její přední hrany.
3. Natáhněte ruce dozadu a položte dlaně na područky.
4. Pomalu si sedejte. Ohýbejte lokty a podle možností také kolena a kyčle.
5. Při vstávání se opřete dlaněmi o područky a zvedněte se. Než područky pustíte, ujistěte se, že bezpečně udržíte rovnováhu.

K čištění židle nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.

Montáž


1. Sestavte boční rámy židle (obr. 1).
2. Vložte šrouby do spodních otvorů (obr. 2).
3. Připojte zadní spojovací příčku (obr. 3).
4. Utáhněte křídlové šrouby (obr. 4).
5. Připevněte příčky pro uchycení nádoby (obr. 5).
6. Připevněte přední spojovací příčku židle (obr. 6).



Obrázek 1



Obrázek 2

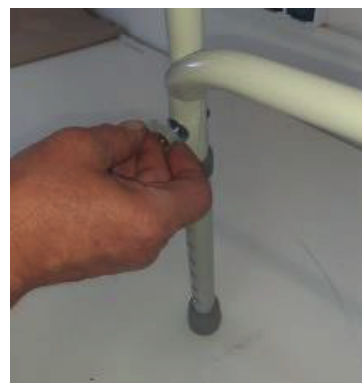

Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6

Montáž pokračování

7. Připevněte opěradlo a zajistěte je křídlovými šrouby (obr. 7 a 8).
8. Vložte hygienickou nádobu do rámu (obr. 9).
9. Nasadte toaletní sedátko (obr. 10).
10. Nasadte víko sedátka (obr. 11).
11. Zkontrolujte stabilitu židle (obr. 12).



Obrázek 7



Obrázek 8



Obrázek 9



Obrázek 10



Obrázek 11




Obrázek 12

Nastavení výšky

Výšku nastavte pomocí zajišťovacích tlačítek v nohách židle. Jednou rukou stiskněte zajišťovací tlačítko (obr. 13) a druhou rukou posuňte trubku do požadované polohy. Tlačítko musí zcela zapadnout do otvoru.

Po nastavení ověřte, že jsou všechny čtyři nohy ve stejné výšce a židle stojí stabilně.

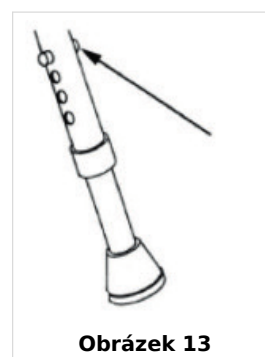

Obrázek 13

VII Čištění a údržba

1. Pravidelně kontrolujte, zda není židle poškozená nebo viditelně opotřebená. Ověřte zejména, že:
 - na rámu nejsou praskliny ani deformace;
 - koncovky nejsou poškozené; poškozené koncovky vyměňte;
 - žádná další část toaletní židle není uvolněná nebo poškozená.
2. Židli pravidelně čistěte měkkým hadříkem a vodou s mýdlem. Po vyčištění ji osušte měkkým hadříkem. Hygienickou nádobu lze dezinfikovat za studena, například ethanolem.
3. Pravidelně kontrolujte pohodlí při používání a neporušenost svarů.
4. Kontrolujte funkci upevňovacích prvků, stav šroubů a opotřebení koncovek.
5. Používejte pouze neagresivní čisticí prostředky.
6. K dezinfekci používejte prostředky na bázi alkoholu.
7. Výrobek zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

VIII Ukončení používání

Zjistíte-li při kontrole podle pokynů výrobce závadu, výrobek ihned přestaňte používat. Po skončení používání jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

IX Předpokládaná doba používání

Výrobce nestanovuje pevnou dobu používání židle. Skutečná doba může být delší nebo kratší podle četnosti používání a způsobu údržby.

X Záruka

Výrobce zaručuje, že prodáváný výrobek je nový a kvalitní. Na výrobek se vztahuje záruka; podrobné záruční podmínky jsou uvedeny na webových stránkách výrobce. Výrobek používejte pouze v souladu s určením a doporučeními tohoto návodu.

XI Význam symbolů

Výrobce	Výstraha
Označení CE	Kód šarže
Katalogové číslo	Množství
Datum výroby	Tímto směrem nahoru, nepřevracet
Přečtete si návod k použití	Chraňte před vlhkostí
Zdravotnický prostředek	Křehké, zacházejte opatrně
Jedinečný identifikátor prostředku UDI	

Výrobce

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polsko
E-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

Identifikace originálu: I/PL/RF-805/2/18.12.2024. Datum vydání originálního návodu: 12. 12. 2024, verze 2.

Tento dokument je českým překladem polského originálu výrobce. V případě rozporu nebo nejasnosti kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele.